




シリンジ情報

一社) 川崎市薬剤師会

7月30日改定版



第5クール流通分



- * デッドスペースも少なく、
気泡も比較的に入りにくい製品です
- * 針の結合が緩く、注射時に患者の体に
針が残ってしまった事故が発生したため
シリンジと針を強めに結合するのが
ポイントになります。
- * ピストンが特徴的な形をしていますので
0.3を合わせる位置を間違えないようご注意ください



第7クール流通分

* やや透明度が低く、暗い場所での目盛りの読み取りがしにくい傾向があるので、光にかざして調製・監査を行うと楽です。

ピストンのこの線を0.3に合わせる

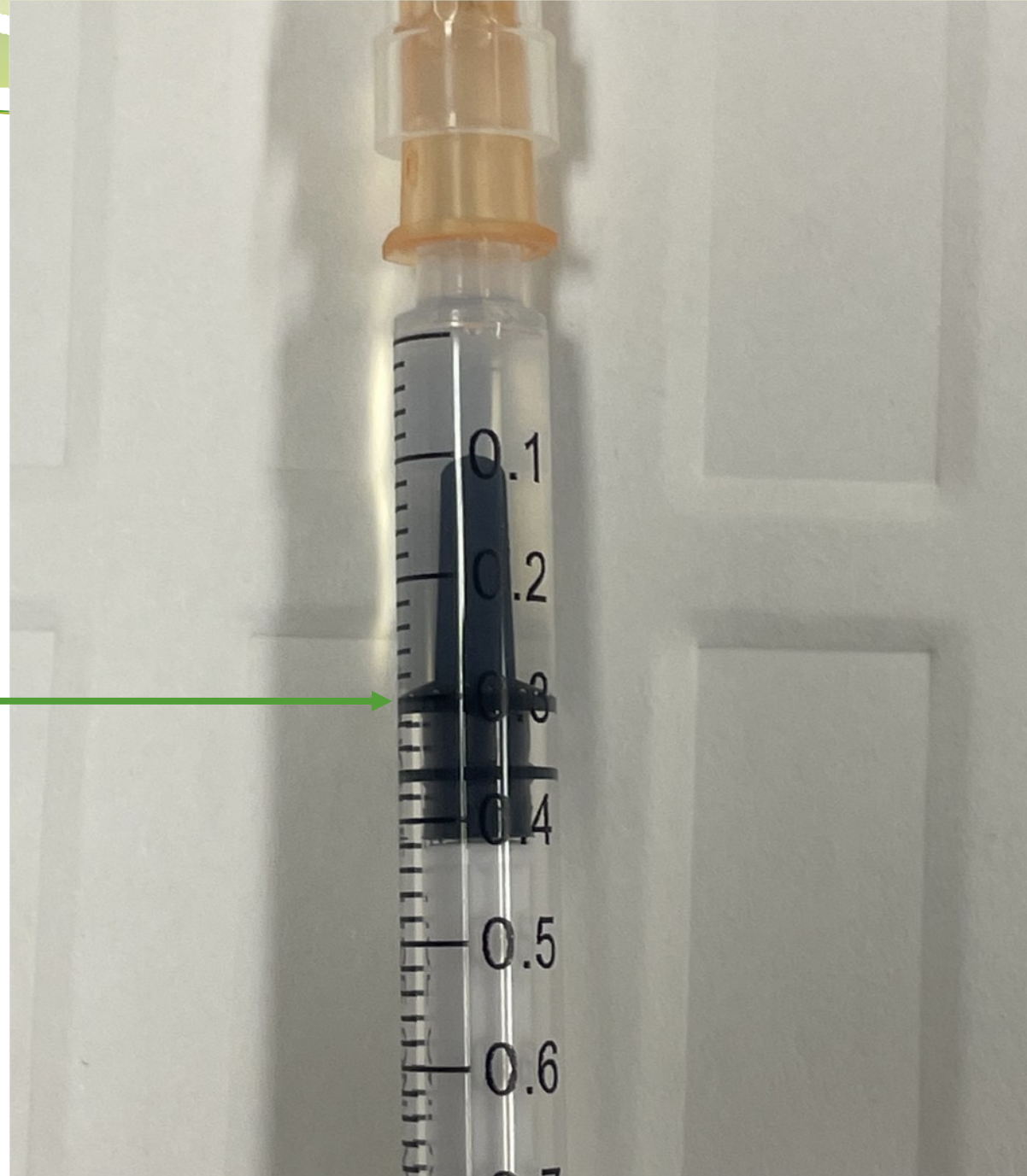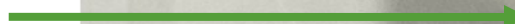


第8クール流通分

T.H.Mアライアンス社 SINVAシリンジ1ml

* ピストンが非常に軽いので秤量後に液漏れしやすく取り扱いに注意が必要です

ピストンのこの線を0.3に合わせる

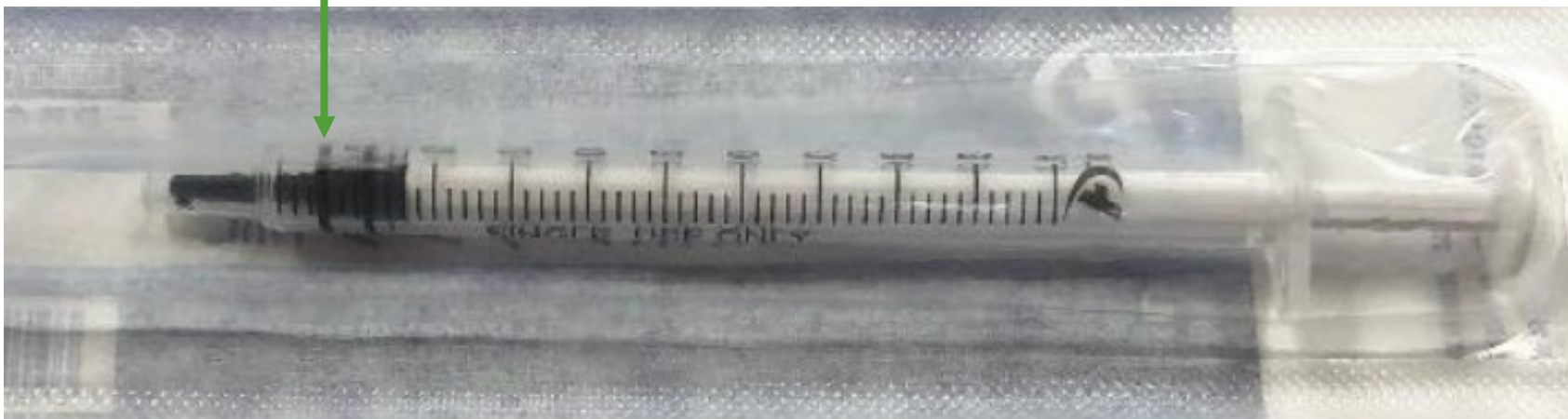


* 村上市新型コロナワクチン接種推進チームホームページより画像借用

川崎市独自配布品

- * TOP社製
- * 針とシリンジが一体型になってます。
- * デッドスペースが少なく1バイアルより6本秤量するのが比較的楽です
- * ピストンの滑りが良い為、バイアル内圧で位置が動くのでご注意ください



0.3ml

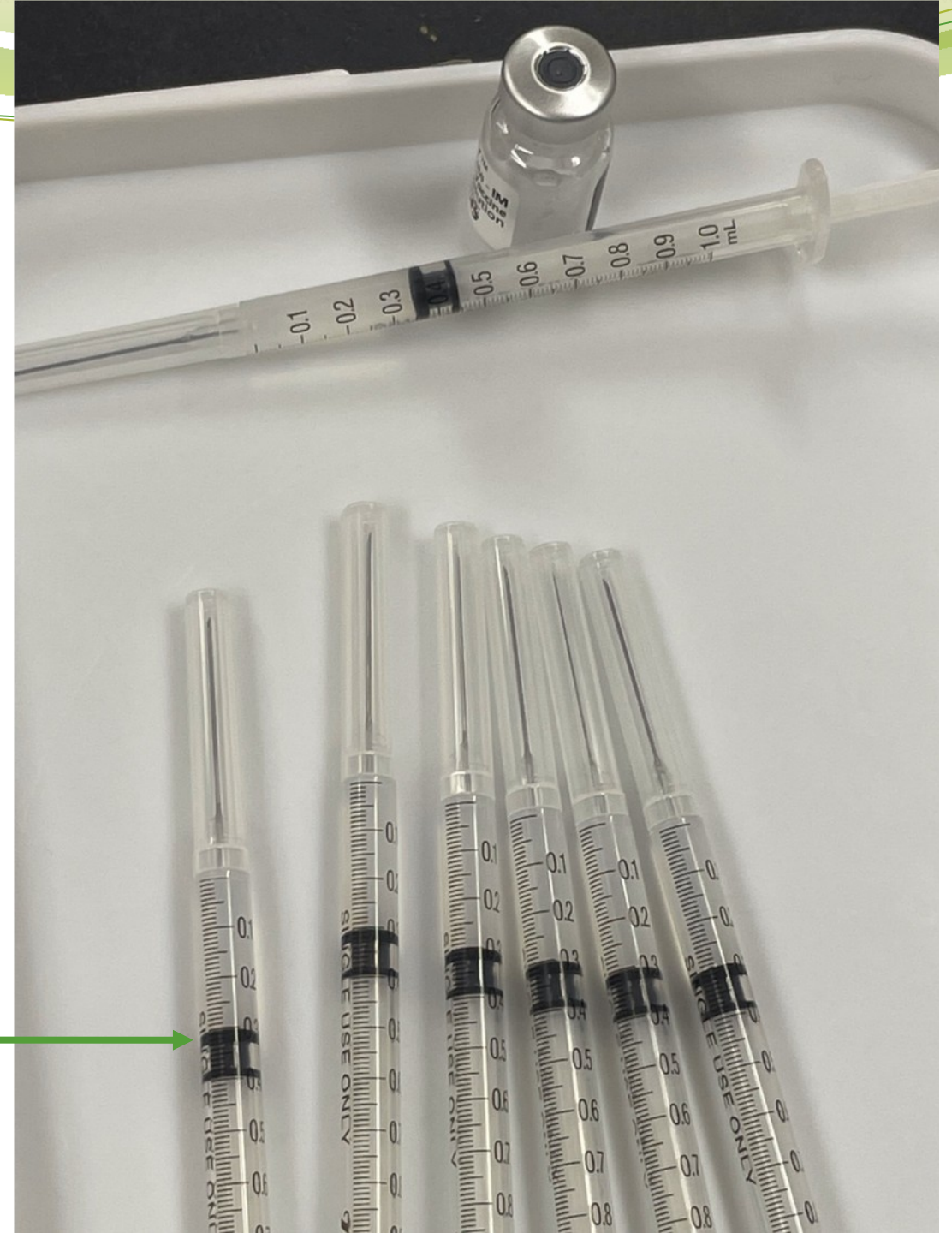

川崎市行政よりの情報サイト

- 2021/7/29付けで、シリンジ情報が2点発表されています。

<https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000128710.html>

こちらのサイトの中ほどにある

<https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000128/128710/bihin1.pdf>

<https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000128/128710/bihin2.pdf>

が大変参考になります。